




FICHE PRATIQUE

« Utilisation du dispositif médical : La caméra à main »

Contact et assistance :	support@normand-esante.fr 02 50 53 70 01
--------------------------------	--

Date de dernière mise à jour :	24/01/2019
---------------------------------------	------------

Nb de pages :	4
----------------------	---

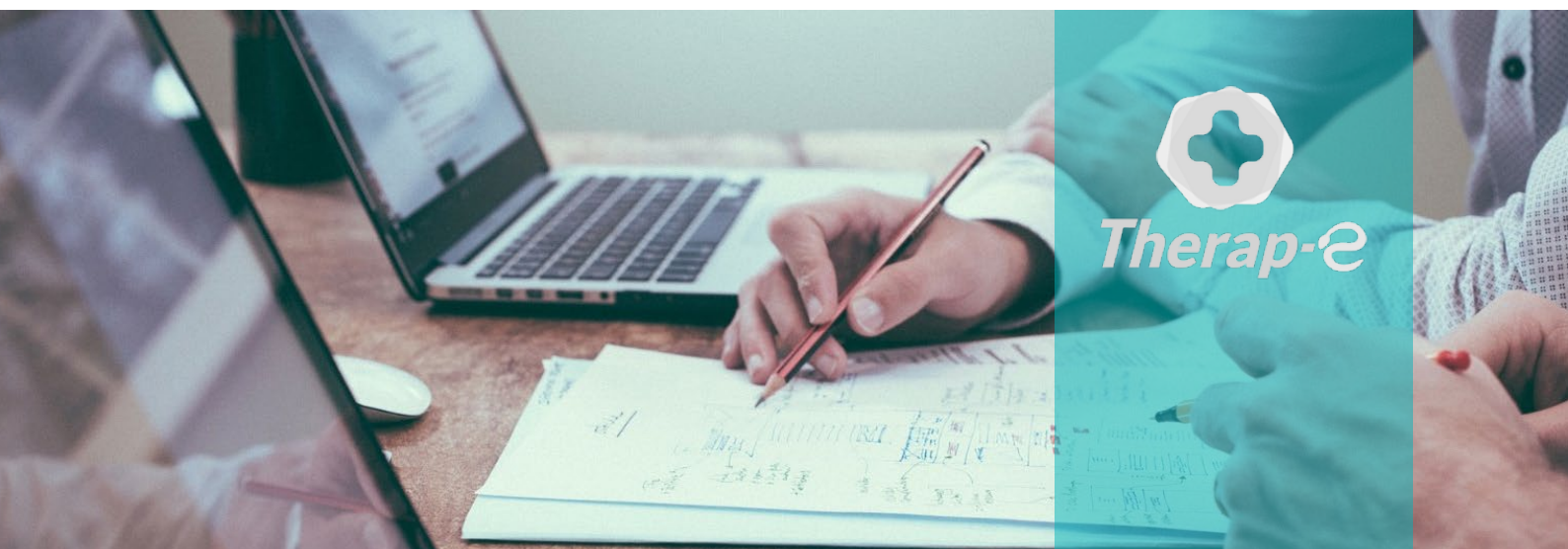

SITE DE CAEN





Siège social
Bâtiment COMETE
7 longue vue des astronomes
14111 Louvigny
02 50 53 70 00

SITE DE ROUEN

1231 rue de la Sente aux Bœufs
76160 Saint Martin du Vivier
02 32 80 91 50

contact@normand-esante.fr

1 Présentation de la caméra à main

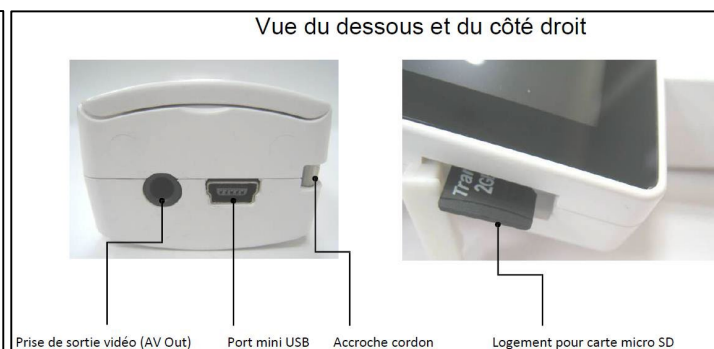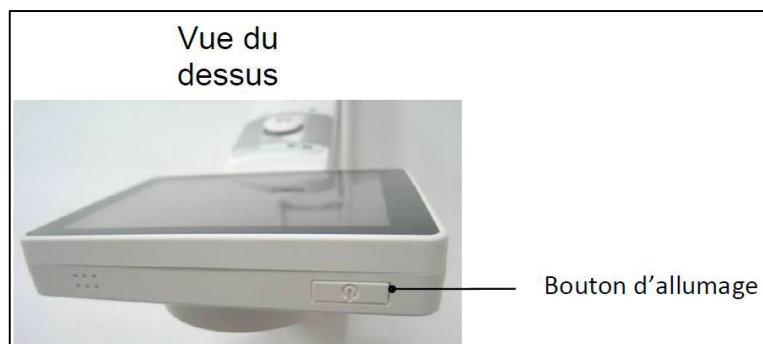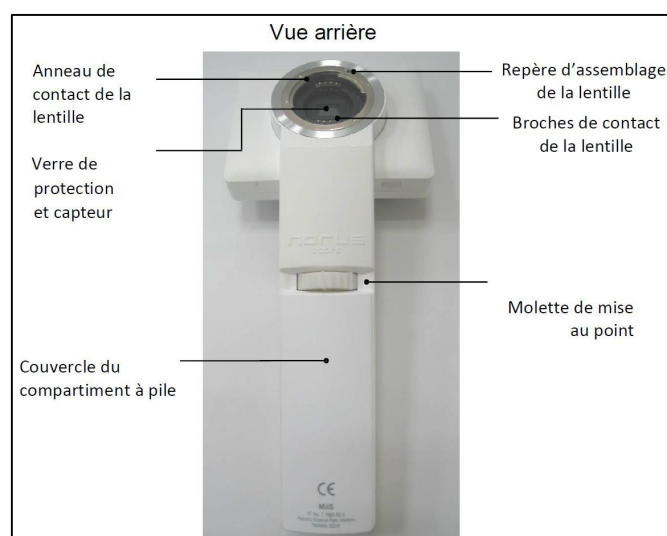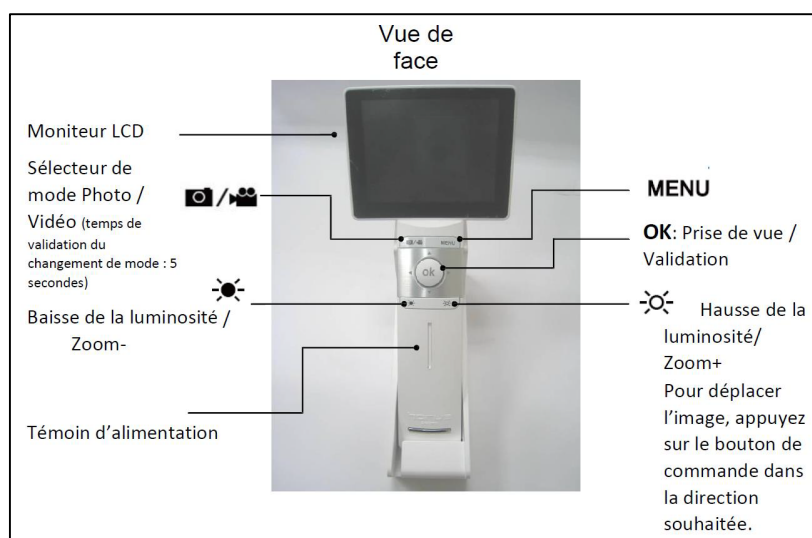

2 Utilisation de la caméra à main

2.1 Configuration de la caméra main pour la prise de photo

- Vérifier que la caméra est chargée
- Vérifier que le fichier .bat (servant à la récupération des photos), fonctionne sur le poste
- Allumer la caméra (pour un dermatoscope, sélectionner le modèle **DSC200** au démarrage)
- Appuyer sur l'icône appareil photo en haut à gauche de l'écran pour ouvrir l'écran de prise de photo

2.2 Fonctionnement avec la plateforme Therap-e pour la prise de photo

- Se connecter à la plateforme Therap-e
- Ouvrir un télédossier
- Prendre une photo

Elle est automatiquement téléchargée dans le télédossier

NB : si pas de télédossier ouvert, la photo s'enregistre dans un dossier sur le poste de travail.

2.3 Configuration de la caméra main pour vidéo en temps réel

- Vérifier que la caméra est branchée à l'ordinateur via le câble USB
- Allumer la caméra (pour un dermatoscope, sélectionner le modèle **DSC200** au démarrage)
- Appuyer sur l'icône « appareil photo » en haut à gauche de l'écran puis sur l'icône paramètre
- Appuyer sur UVC en haut à droite de l'écran
- Appuyer sur l'icône paramètre en haut à gauche de l'écran puis sur l'icône « appareil photo » pour revenir à l'écran de prise de photo

2.4 Fonctionnement avec la plateforme Therap-e pour vidéo en temps réel


- Se connecter à la plateforme Therap-e
- Cliquer sur l'onglet salle puis sur une salle pour entrer en visioconférence
- La caméra se lance en même temps que la visioconférence

- Double-cliquer sur la vignette pour l'agrandir
- Une fois la visioconférence terminée, quitter la salle en cliquant sur le téléphone rouge afin de couper le flux vidéo
- Eteignez la caméra



3 Changement des optiques de la caméra

Etape n°1 : Alignez les repères de la lentille optique et de l'unité de contrôle.

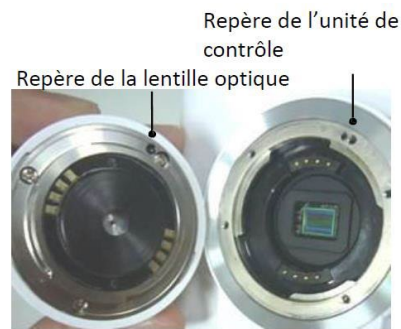

Etape n°2 : Saisissez la lentille optique et insérez-la dans l'unité de contrôle.



Etape n°3 : Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et verrouillez de manière à ce que le marqueur blanc de l'optique soit en position horizontale.

