

FICHE PRATIQUE

« Utilisation du dispositif médical : l'ECG »

Contact et assistance : support@normand-esante.fr
02 50 53 70 01

Date de dernière mise à jour : 24/01/2019

Nb de pages : 6



SITE DE CAEN

Siège social
Bâtiment COMETE
7 longue vue des astronomes
14111 Louvigny
02 50 53 70 00

SITE DE ROUEN

1231 rue de la Sente aux Bœufs
76160 Saint Martin du Vivier
02 32 80 91 50

contact@normand-esante.fr

1 Avant-propos

L'acquisition d'un tracé d'électrocardiogramme (ECG) est un acte infirmier réalisé sur prescription médicale. Il ne peut en conséquence être effectué qu'exclusivement par un personnel infirmier diplômé d'Etat sur prescription médicale, ou directement par un personnel médical.

Le Code de santé publique précise : Article R4311-7


28° « Enregistrements simples d'électrocardiogrammes, d'électro encéphalogrammes et de potentiels évoqués sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 4311-10 »

2 Enregistrement de l'ECG

2.1 Installation


L'ECG s'effectue en 12 dérivations.

Placer les électrodes autocollantes à usage unique sur la poitrine du patient. Un schéma de rappel se trouve en haut de l'écran d'acquisition du tracé, à gauche.

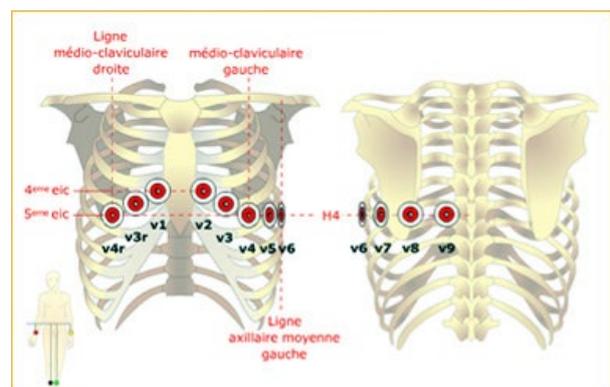


2.2 Alimentation automatique du télé dossier avec le tracé


- Se connecter à COVOTEM (voir le guide de connexion à la plateforme)

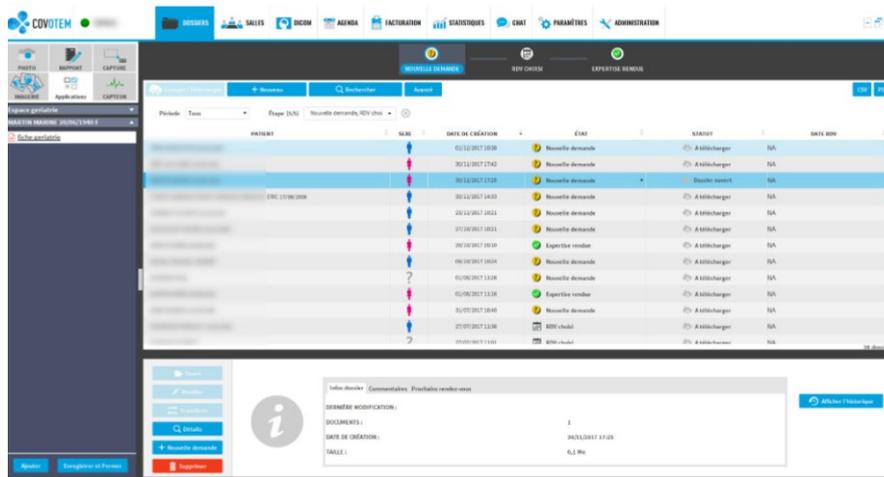

- Ouvrir le télé dossier du patient** à alimenter en double-cliquant dessus
- Réaliser l'ECG sur le patient
- Appuyer sur le bandeau en haut pour renseigner l'identité du patient

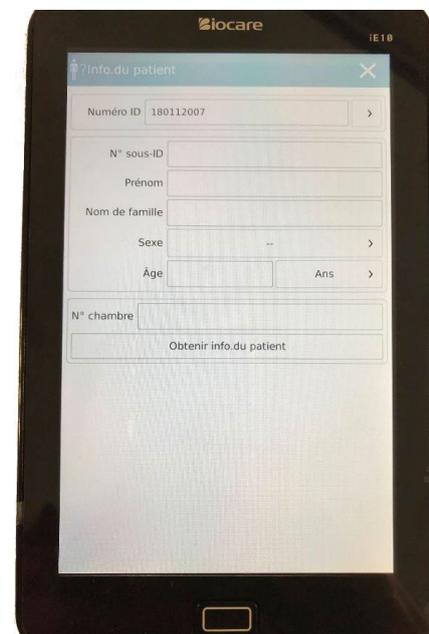


- Appuyer sur « Transférer » pour envoyer le tracé dans le télédossier

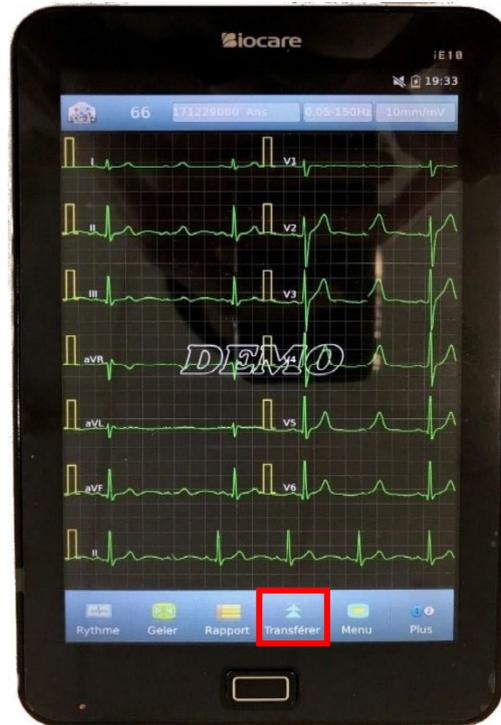


- L'ECG est ajouté automatiquement dans le dossier Covotem™ ouvert
- Fermer le dossier et éteignez l'ECG

2.3 Alimentation manuelle du télédossier avec le tracé


- Se connecter à COVOTEM (voir le guide de connexion à la plateforme)

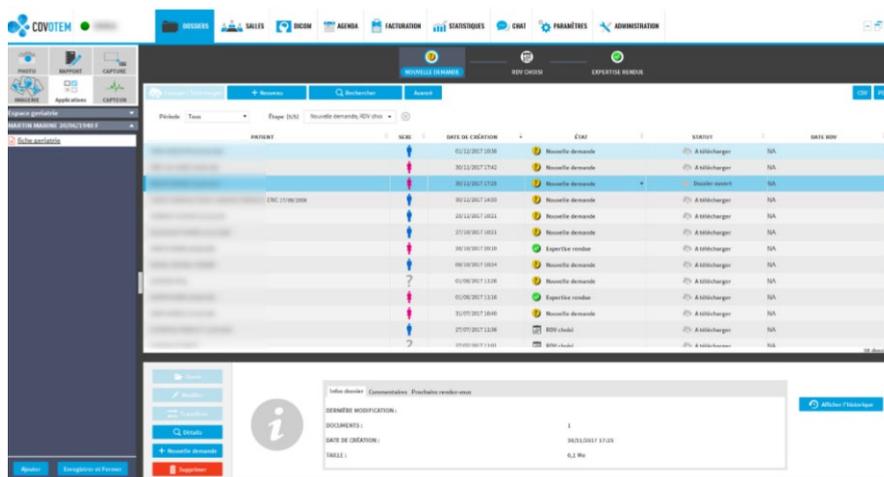


- Ouvrir le **téledossier du patient** à alimenter en double-cliquant dessus
- Réaliser l'ECG sur le patient
- Appuyer sur le bandeau en haut pour renseigner l'identité du patient

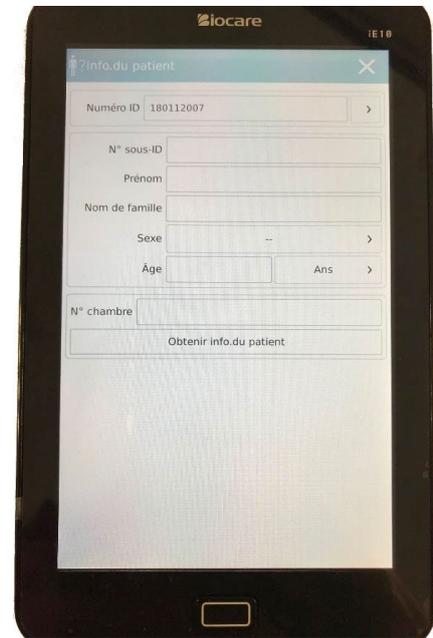


- Appuyer sur « Rapport » pour capturer le tracé
- Appuyer sur « Sauv » pour enregistrer l'ECG

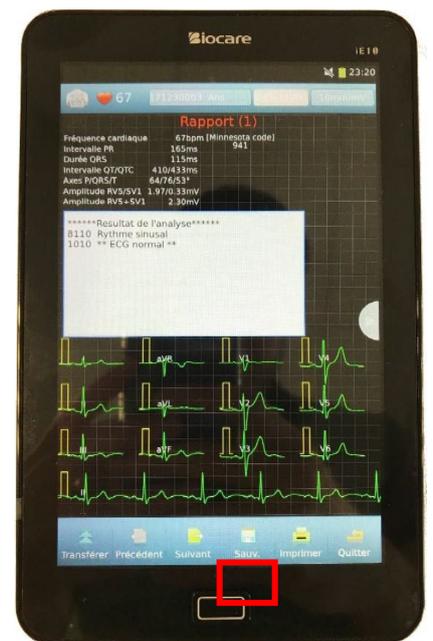

- Appuyer ensuite sur le bouton « Menu » de l'ECG puis sur « Gestion de Data » pour retrouver le tracé

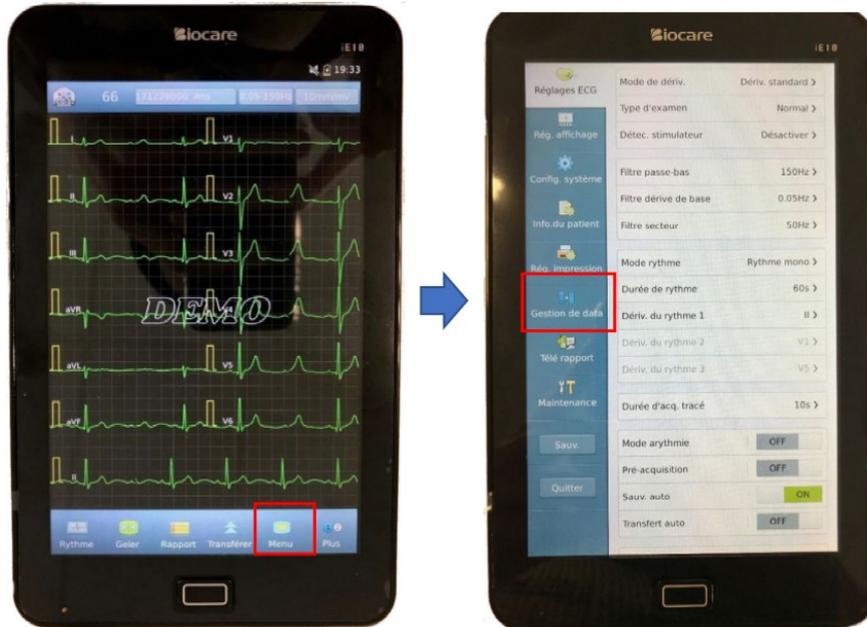

- Sélectionner le tracé puis appuyer sur « Opérer »
- Appuyer sur « Transférer » pour envoyer l'ECG dans le télédossier

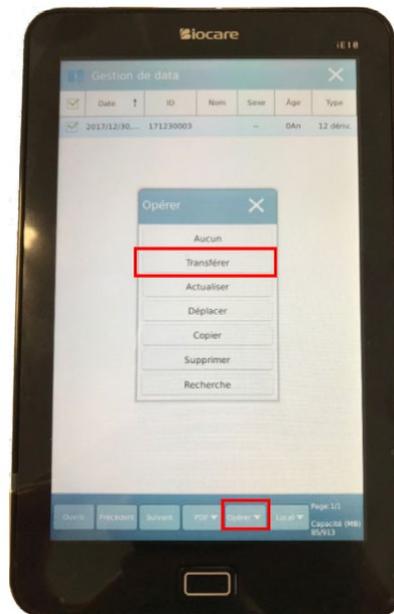

L'ECG est ajouté automatiquement dans le dossier Covotem™ ouvert

- Fermer le télédossier et éteindre l'ECG